

RNA快速提取试剂盒 快速无毒

产品特点

- ★ 安全无毒:无苯酚氯仿等有毒物质。
- ★ 多样品通用:适用组织和细胞样本。
- ★ 操作简单:操作仅需四步,提取过程10-15min。
- ★ 产物质量优:产物可用于RT-PCR、qPCR、Northern blotting、cDNA文库构建等多种实验。



操作步骤 仅需10分钟



Quazol™ 总RNA提取试剂盒

产品优势

- ★ 通用可靠的Trizol法,有效抑制RNA降解,得到产物可直接用于下游实验。

操作步骤



相关产品

产品编号	名称	包装	价格
SB-R001	细胞RNA快速提取试剂盒(快速无毒)	50T	¥400元
		100T	¥750元
		500T	¥3000元
		1000T	¥5000元
SB-R008	组织RNA快速提取试剂盒	100T	¥880元
SB-MR009	Quazol™ 总RNA提取试剂盒	100ml	¥300元
		200ml	¥550元
		1000ml	¥2500元
SB-G3014	核酸抽提辅助剂(氯仿替代物)	25ml	¥50元
		100ml	¥150元
		10*100ml	¥1300元
SB-R010	糖多酚植物RNA抽提试剂盒	100T	¥1000元
		500T	¥4000元
		1000T	¥6000元

qPCR预混液


ShareBio

操作简单 · 降低污染 · 扩增效率高

- ★ 圣尔2*Universal SYBR Green qPCR预混液系列产品包含除引物和 DNA 样品以外的所有 qPCR 组分,可减少操作步骤,缩短加样时间,降低污染几率。
- ★ 核心组分采用抗体修饰的热启动 Taq DNA 聚合酶,配合精心优化的 Buffer 体系以及 PCR反应促进因子,使产品具有特异性强、扩增效率高等特点,有效抑制非特异性扩增,可对宽广浓度范围的模板进行准确定量,获得稳定可靠的 qPCR 结果。



- 蓝色孔为未加模板的qPCR mix
- 黄色孔为用Dilution Buffer稀释的模板
- 绿色孔为二者混合

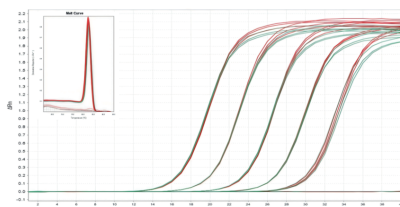

▲ 示踪染料不影响产品扩增效果
qPCR产品效果展示图: — SB-Q204 — SB-Q205

飞敏™

Visual SYBR qPCR Premix

加样可视

飞敏™ Visual SYBR qPCR Premix 中包含蓝色染料, 10 × Dilution Buffer 中包含黄色染料。当 飞敏™ Visual SYBR qPCR Premix (蓝色) 中加入了用Dilution Buffer 稀释的模板 (黄色) 后会产生蓝色 → 绿色的变色效应, 从而可以根据液体颜色准确判断是否已加入模板。可利用不同染料混合后产生的变色效应, 追踪移液过程, 从而显著减少移液错误。

相关产品

产品编号	名称	包装	价格
SB-Q204	2*Universal SYBR Green qPCR Premix	5*1ml	¥500元
		50*1ml	¥3990元
		75*1ml	¥5000元
SB-Q205	飞敏™ Visual SYBR qPCR Premix (Universal)	5*1ml	¥500元
		50*1ml	¥3990元
		75*1ml	¥5000元
SB-RT001	一管式反转录试剂盒 (50°C, 含基因组DNA去除酶及buffer) 20 ul体系	50T	¥500元
		100T	¥650元
		150T	¥1000元

请联系销售员:



销售微信



微信公众号

ShareBio

上海圣尔生物科技有限公司

021-34122580

www.share-bio.com

上海市闵行区剑川路951号1幢南区615室