


圣尔生物质粒抽提试剂盒

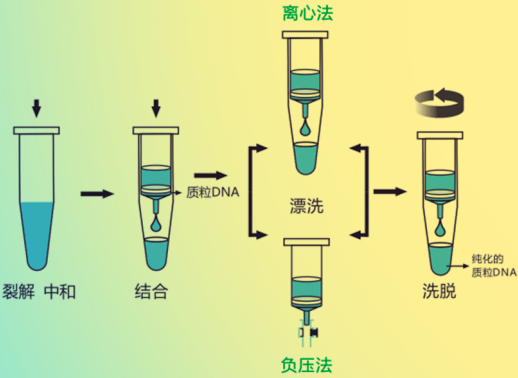

质粒抽提方法即去除 RNA，将质粒与细菌基因组 DNA 分开，去除蛋白质及其它杂质，以得到相对纯净的质粒。

从提取产量上分可分为微量提取、中量提取、大量提取。

产品编号	名称	包装	价格	产品特点
SB-NG201	高纯度质粒小提试剂盒	100 T	¥ 210.00	1.传统方法：碱裂解法裂解细胞。
	(1-5 ml 菌液,可提取 20 µg 的纯净质粒)	200 T	¥ 408.00	2.提取的质粒 DNA 纯度高:可适用于酶切、PCR、测序连接、转化等常规实验操作。
SB-NG221	高纯度质粒大提试剂盒	10 T	¥ 640.00	
SB-211	高纯度质粒小提中量试剂盒	100 T	¥ 408.00	1.离心吸附柱内硅基质膜全部采用进口特制吸附膜:柱与柱之间吸附量差异极小,可重复性好。
	(5-15m 菌液,可提取 50ug-60ug 纯净质粒)	50 T	¥ 210.00	2.独有的去蛋白液配方,可以高效去除残留的核酸酶:即使是核酸酶含量丰富的菌株如 JM 系列、HB101 也可以轻松去除。有效防止了质粒被核酸酶降解。
SB-EQ201	增强型无内毒素质粒大量提取试剂盒	10 T	¥ 550.00	3.快速、方便、安全:不需要使用有毒的苯酚、氯仿等试剂,也不需要乙醇沉淀。获得的质粒产量高、纯度好,可以直接用于酶切、转化、PCR、体外转录、测序等各种分子生物学实验。
SB-213	无内毒素质粒小提中量试剂盒	50 T	¥ 464.00	1.独特工艺配方清除内毒素:内毒素含量极低(<0.1 EU/ug) , DNA 细胞转染效果极佳。
				2.质粒纯度高:可直接用于酶切、转化、PCR、体外转录、测序、等各种分子生物学实验。
				3.适用于中量提取:5-15 ml 培养物,可提取出多达 50 µg-60 µg 的纯净质粒。
SB-NG223	无内毒素质粒大提试剂盒(转染级)	10 T	¥ 784.00	1.快速方便产率高:从 150-200 ml 大肠杆菌过夜培养物中,可快速提取 0.2-1.5 mg 纯净的高拷贝质粒 DNA,提取率达 80-90%。
				2.独特工艺配方清除内毒素内毒素含量极低(<0.1 EU/ugDNA),细胞转染效果极佳。
				3.应用广泛:采用独特的溶液体系可处理各种质粒载体(包括高中低拷贝、大型质粒,如 BCA,cosmid 等)也可直接用于酶切、转化、PCR、体外转录、测序等各种分子生物学实验。

圣尔生物抗性筛选

产品编号	名称	包装	价格	产品特点
SB-CR021	嘌呤霉素 (10mg/ml)	10 mg	¥ 160.00	常用于筛选通过质粒转染/转化、病毒感染等方法能表达 pac 基因(puror)的真核或原核多克隆或单克隆细胞。Puromycin 不仅用于稳定细胞株的筛选,也用于稳定细胞株的维持。本产品的 10mg/ml 包装经过滤除菌,可以直接用于细胞培养。
		50 mg	¥700.00	
		100 mg	¥ 2640.00	
				其特点是快速作用于细胞,一般 2 天内可以杀死 99%的不表达 pac 基因的细胞。

